

ALM 500		ALM 700	
FAIXA DE MEDIÇÃO			
Esférico	-25.00D ~ +25.00D - (0.01 / 0.12 / 0.25)		
Cilíndrico	0.00D ~ ±10.00D (0.01 / 0.12 / 0.25)		
Eixo	1 a 180° (1°)		
Adição	0.00D a 10.00D - (0.01 / 0.12 / 0.25)		
Prisma	0.00Δ a 10.00Δ - (0.01 / 0.12 / 0.25)		
COMPRIMENTO DE ONDA	525nm		
TIPOS DE MEDIDAS			
Lentes	Visão simples, Multifocal e Progressiva		
Lentes coloridas	Até classe 4 (>5%)		
Lentes de contato	Rígidas e gelatinosas (suporte dedicado)		
TESTE DE TRANSMISSÃO UV	—	0 a 100% (-25D ~ +25D)	
Comprimento de onda	—	375nm (UV-A)	
DISTÂNCIA INTER-PUPILAR (DNP)	—	45mm a 85mm (0.5mm)	
Tela	Colorida LCD 5.7”		
Impressora térmica embutida	Sim		
Conexão	RS 232 C		
Dimensões e peso	170mm x 205mm x 468mm – 4.3kg		
Fonte de alimentação	100 to 240V – 50/60Hz - 40VA		


DVWK Cód. 112006 Novembro/15. Como parte de uma constante melhoria, estas especificações não possuem vínculos contratuais e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ALM 500
ALM 700



Transferência de dados

Para simplificar e acelerar o processo de exame, o ALM pode transferir os valores para seu refrator ou software de gestão de pacientes.*

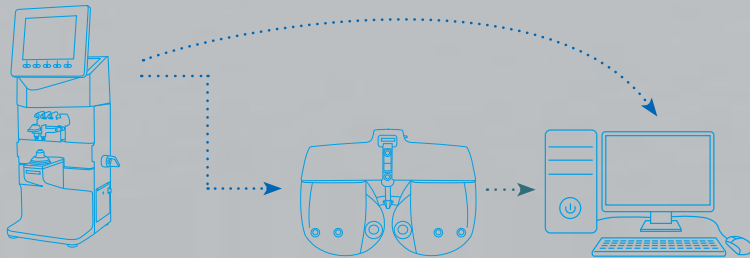

* Verificar compatibilidade entre o refrator e/ou software de gestão com os lensômetros da linha ALM.

- 25.00 δ
+25.00 δ
Esférico
- 10.00 δ
+10.00 δ
Cilíndrico
- Lentes curvas
- Óculos escuros classe 4
- Impressora térmica



ALM 500
ALM 700



Medição simples e confiável.

Ligue Fácil
0800 722 1222
www.essilorsolutions.com.br


Essilor
Solutions
Desde sempre com você.

Essilor
Solutions

Mede todos os tipos de lentes e armações

Os lensômetros automáticos **ALM500** e **ALM700** asseguram a medição rápida e precisa de todos os tipos de lentes e armações.


Medidas rápidas e precisas

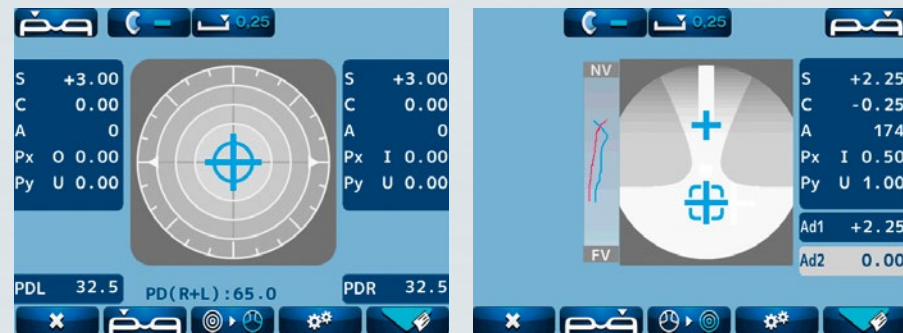

- A linha de lensômetros ALM detecta todo o tipo de lente, orienta o operador para a centragem e confirma automaticamente a medição.
- O design exclusivo do sistema de marcação permite o bloqueio e marcação em uma única operação.


Teste de transmissão UV

- Integrado ao Lensômetro **ALM 700***, o teste de transmissão de UV não requer manipulação adicional.
- A medição de potência da lente e transmissão UV são exibidas simultaneamente na tela principal.

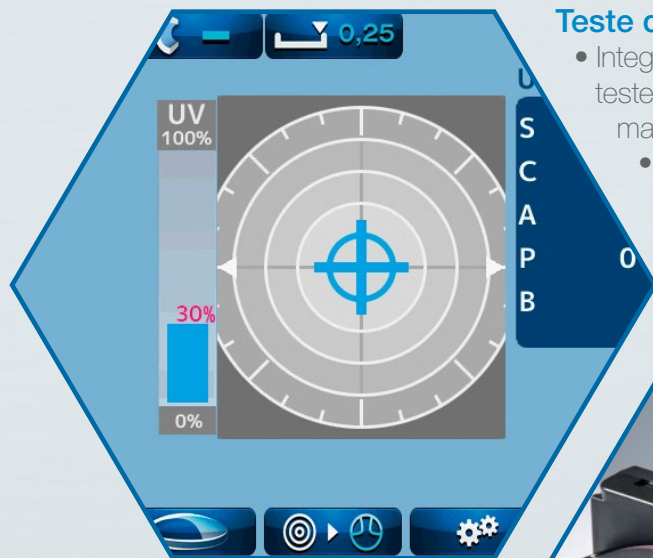

Feixe de luz verde

A série de lensômetros digitais ALM apresentam a tecnologia do uso do feixe de luz verde que permite leitura mais estável e livre de interferências, medindo todos os materiais em qualquer valor ABBE.

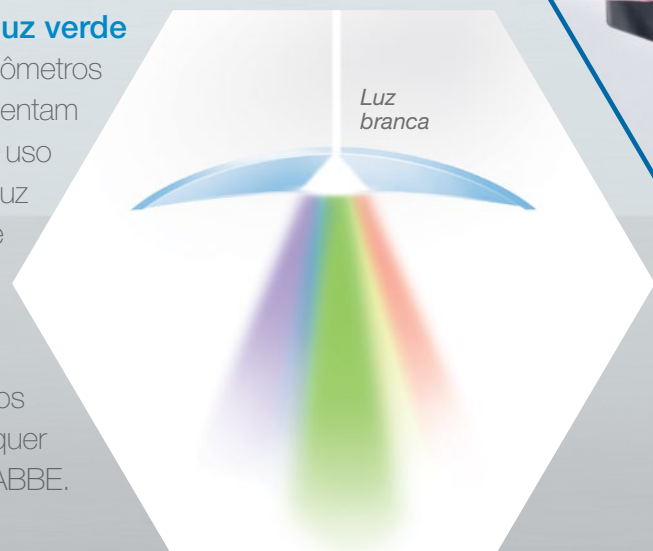


Distância inter-pupilar (DNP)

- O **ALM 700*** também mede a distância inter-pupilar (DNP).
- Com um exclusivo design do suporte, torna as operações simples e eficientes.

Conforto e comodidade



Posição de inclinação ajustável.

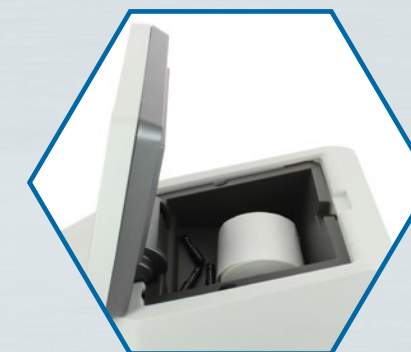

Espaço para armazenamento de acessórios.



A tela colorida e inclinável garante conforto na utilização. O **ALM 700*** inclui tela touch screen similar ao dos smartphones ou tablets.



Substituição simples e rápida das ponteiros de marcação.



* Função disponível somente no modelo ALM 700.

ALM 500
ALM 700

