


TUDO PARA O EXAME OCULAR ESSENCIAL



SL 350 / SL 450

LÂMPADAS DE FENDA

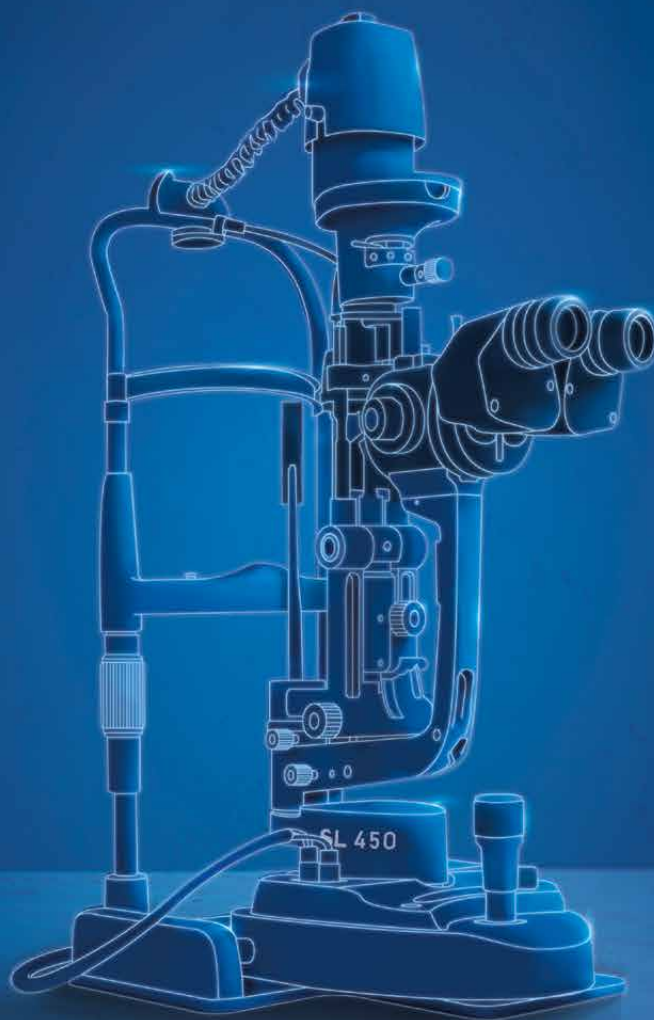

ESSILOR
INSTRUMENTS



SISTEMA ÓPTICO HD

- Resolução óptica em alta definição, proporcionando visão mais ampla e detalhada das patologias.
- Níveis de ampliação facilmente acessíveis por rotação do tambor.
- Acesso instantâneo a todas as funções graças ao seu design compacto e ergonômico.



ILUMINAÇÃO LED BRILHANTE

- Sistema de iluminação em torre, com inclinação de até 20°.
- Baixa temperatura de cor e alta intensidade de iluminação para melhor experiência.
- Maior vida útil e menor consumo de energia.



FILTRO AMARELO INCORPORADO

- Filtro amarelo integrado, junto com filtro azul cobalto, aumenta o contraste da imagem com coloração por fluorescência para uso diário.



INSTALAÇÃO FÁCIL

- Pannel de controle compacto com fonte de alimentação integrada, facilitando a instalação e mantendo a suavidade no uso clínico.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Ocular com régua de medição, tubo de observação, adaptador para tonômetro.

ESPECIFICAÇÕES

AMPLIAÇÃO

Tipo	Galileu
Cilindro	12,5x
Seleção	Rotação por tambor
Campo de visão	
SL350 L	10x (22 mm) – 16x (14 mm) – 25x (8,9 mm) 6,3x (36,2 mm) – 10x (22 mm)
SL450 L	16x (14 mm) – 25x (8,9 mm) – 40x (5,7 mm)

BASE

Movimento longitudinal	110 mm
Movimento lateral	110 mm
Movimento vertical	30 mm
Apoio de queixo (vertical)	80 mm

FENDA

Largura da fenda	Contínua de 0 a 14 mm
Comprimento da fenda	Contínuo de 1 a 14 mm
Abertura	0,2 a 14 mm
Ângulo da fenda	0 a 180°
Inclinação	5°, 10°, 15°, 20°

LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO

SL350L/SL450L	Lâmpada LED 3V, 3W
---------------	--------------------

FILTROS – Absorção de calor, ND, livre de vermelho, azul cobalto, filtro amarelo incorporado

Alimentação	220/110V (±10%)
Dimensões e peso	740mm x 450 mm x 530 mm (L/L/A) 22kg

À medida que melhorias são realizadas, estas especificações e imagens não têm caráter contratual e podem ser alteradas sem aviso prévio.



Ligue Fácil:

4000-2925

essilorinstrumentos.com.br

OptiCall (WhatsApp):

(21) 96785-1480

